

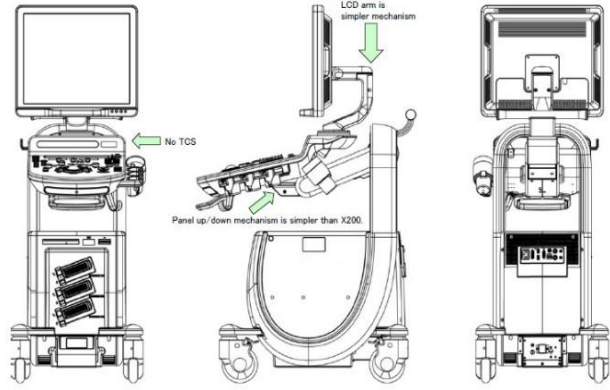
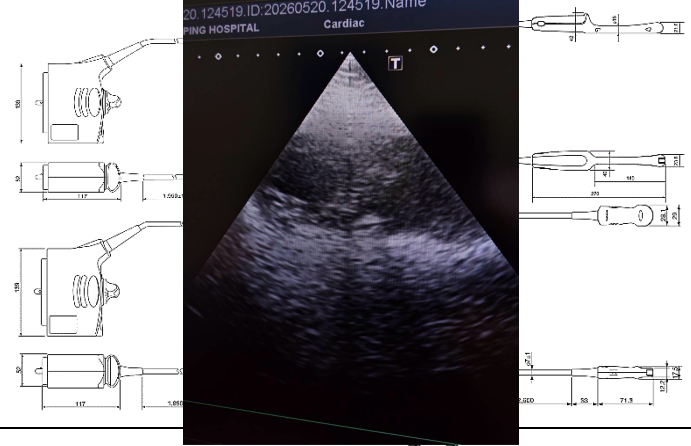
ใบงานตรวจสอบบำรุง

เลขที่ใบรายงานผลการบริการ.....

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปี 2026

ULTRASOUND

หมายเลขงาน (Service Call) 18.599.064

ข้อมูลลูกค้า ลูกค้า.....โรงพยาบาลนครพิงค์..... อาคาร.....OPD.....ชั้น.....1..... แผนก.....OPD..... ห้อง.....1..... ชื่อลูกค้าที่ติดต่อ..... เบอร์โทรศัพท์.....ต่อ..... E-mail :	ข้อมูลเครื่อง เครื่องรุ่น TUS-X100S.....หมายเลขเครื่อง W5F1895060..... ระยะเวลาประกัน เริ่มต้น 01/10/2025 สิ้นสุด 30/09/2026..... การซ่อมบำรุงครั้งที่.....1.....จากทั้งหมด.....3.....ครั้ง ประเภทสัญญา ☐ Warranty ☐ Non-Service Contract ☐ Contract with part ☐ ☒ Contract without part Software version : V6.0.....Service Pack : SP0023..... Image File : ☒ Yes ☐ No Preset Original ☐ Yes ☒ No																																																																																				
สภาพภายนอกเครื่อง A = ปกติ , B = ผิดปกติและทำการแก้ไขแล้ว , C = เป็นรอย/ฉีกขาด																																																																																					
สภาพภายนอก เครื่อง Ultrasound ☒ Remark 	สภาพ Probe ☒ Remark 																																																																																				
รายการตรวจเช็คตามรายการของโรงงานผู้ผลิต ตรวจเช็ค เปลี่ยน ทำความสะอาด <table border="0"> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>1.Covers/Panel & Trackball.</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>2.System Self Diagnosis</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>3.B & M mode quality functional check</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>4.Doppler & Color mode quality functional Check</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>5.Keyboard & Operation Panel , Panel Test</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>6.Image Memory</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>7.Special option (CW,4D)</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>8.The overall test system in the operation of Service test</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>9.Monitor Check & Touch command screen</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>10.Time and date Check (if the battery is 2.5V Or less , Replace it)</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>11.Port USB</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>12.Appilcaion/System EventLog.....</td></tr> </table> 4569	☒	☐	☒	1.Covers/Panel & Trackball.	☒	☐	☐	2.System Self Diagnosis	☒	☐	☐	3.B & M mode quality functional check	☒	☐	☐	4.Doppler & Color mode quality functional Check	☒	☐	☒	5.Keyboard & Operation Panel , Panel Test	☒	☐	☐	6.Image Memory	☒	☐	☐	7.Special option (CW,4D)	☒	☐	☐	8.The overall test system in the operation of Service test	☒	☐	☒	9.Monitor Check & Touch command screen	☒	☐	☐	10.Time and date Check (if the battery is 2.5V Or less , Replace it)	☒	☐	☐	11.Port USB	☒	☐	☐	12.Appilcaion/System EventLog.....	รายการตรวจสอบเพิ่มเติม ตรวจเช็ค เปลี่ยน ทำความสะอาด <table border="0"> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>1. Casters (ล้อ)</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>2. Thermal Printer</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>3. UPS Check (การสำรองไฟ)</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>4. Network Sending</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>5. Back up Preset</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>6. Probe & Probe holder</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>7. Filter & Fan</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>8. Delete patient list(ลบข้อมูลคนไข้)</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>9. Probe Operating Time.....</td></tr> </table> Result :	☒	☐	☒	1. Casters (ล้อ)	☒	☐	☒	2. Thermal Printer	☒	☐	☒	3. UPS Check (การสำรองไฟ)	☒	☐	☐	4. Network Sending	☒	☐	☐	5. Back up Preset	☒	☐	☒	6. Probe & Probe holder	☒	☐	☒	7. Filter & Fan	☒	☐	☐	8. Delete patient list(ลบข้อมูลคนไข้)	☒	☐	☐	9. Probe Operating Time.....
☒	☐	☒	1.Covers/Panel & Trackball.																																																																																		
☒	☐	☐	2.System Self Diagnosis																																																																																		
☒	☐	☐	3.B & M mode quality functional check																																																																																		
☒	☐	☐	4.Doppler & Color mode quality functional Check																																																																																		
☒	☐	☒	5.Keyboard & Operation Panel , Panel Test																																																																																		
☒	☐	☐	6.Image Memory																																																																																		
☒	☐	☐	7.Special option (CW,4D)																																																																																		
☒	☐	☐	8.The overall test system in the operation of Service test																																																																																		
☒	☐	☒	9.Monitor Check & Touch command screen																																																																																		
☒	☐	☐	10.Time and date Check (if the battery is 2.5V Or less , Replace it)																																																																																		
☒	☐	☐	11.Port USB																																																																																		
☒	☐	☐	12.Appilcaion/System EventLog.....																																																																																		
☒	☐	☒	1. Casters (ล้อ)																																																																																		
☒	☐	☒	2. Thermal Printer																																																																																		
☒	☐	☒	3. UPS Check (การสำรองไฟ)																																																																																		
☒	☐	☐	4. Network Sending																																																																																		
☒	☐	☐	5. Back up Preset																																																																																		
☒	☐	☒	6. Probe & Probe holder																																																																																		
☒	☐	☒	7. Filter & Fan																																																																																		
☒	☐	☐	8. Delete patient list(ลบข้อมูลคนไข้)																																																																																		
☒	☐	☐	9. Probe Operating Time.....																																																																																		

Probe Operating Time					
Probe Model	Serial Number	Used Time (In Hours)	Started Date		
1. PVU-375BT	999B1884115	150	11/10/2018		
2. PSU-30BT	99C1885701	149	12/10/2018		
3. PLU-1005BT	99C235899	651	16/15/2024		
4.					
5.					
6.					
Network					
Network setting				Remark	
IP address US			When the network is used		
Subnet			When the network is used		
Gateway			When the network is used		
AE US		Port :	When the network is used		
IP Address			☐ Storage	☐ MWM	☐ Query
AE Title		Port :	☐ SC.	☐ MPPS	☐ Retrieve
IP Address			☐ Storage	☐ MWM	☐ Query
AE Title		Port :	☐ SC.	☐ MPPS	☐ Retrieve
IP Address			☐ Storage	☐ MWM	☐ Query
AE Title		Port :	☐ SC.	☐ MPPS	☐ Retrieve
Checking the operating environment					
Temperature			°C (Range 15°C - 35°C)		
Humidity			Relative (Range 30% - 85%)		
			Result	Remark	
การ Preventive Maintenance ครั้งที่ 1 : Backup Preset / Copy Image File to NAS			✓		
การ Preventive Maintenance ครั้งที่ 2 : Quality Assurance Transducer & Electrical safety test			—		
การ Preventive Maintenance ครั้งที่ 3 : Routine Check			—		
การ Preventive Maintenance ครั้งที่ 4 : Routine Check			—		
Test Electrical safety & Test Phantom Scan : Standard Every 1 year			Action Plan	Remark	
Test Electrical safety			—		
Test Phantom Scan			—		
Replace Battery UPS : Standard Every 2 years			Replace Date	Action Plan	Remark
UPS..... ¹KVA Model : SCC-1K Serial Number : 310024607817660300018				✓	แบตเตอรี่เสื่อม
Battery..... ²Unit ¹²V ⁷Ah					

Remark : Record/Result (☒ : Good/Pass, N/A: Not applicable, A: Normally, B: ผิดปกติและทำการแก้ไขแล้ว, C: เป็นรอย/ฉีกขาด)

Test Electrical safety & Test Phantom Scan : Standard Every 1 year , Replace Battery UPS : Standard Every 2 years



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34120-25-7

CMC BIOTECH CO., LTD.

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด

Head Office : 364 Soi Ladprao 94 (Panjamit), Ladprao Road, Plab-pla, Wangthonglang, Bangkok 10310

สำนักงานใหญ่ : 364 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. (662) 530-4995-6, 559-2179-80, 538-4102, 538-0710 Fax. (662) 530-7231

รายงานการตรวจเช็คจากโรงงานผู้ผลิต

เนื้อหาการบำรุงรักษา		
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง	Normal	Abnormal/Remark
1.1 ตรวจสอบสื่อนี้และเบรกเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.2 ตรวจสอบกลไกการขับเคลื่อนภาพ, กลไกการลื้อจอภาพเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.3 ตรวจสอบตรวจสอบกลไกการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.4 ตรวจสอบลักษณะภายนอกและการเชื่อมต่อของสายเคเบิลแต่ละเส้นเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.5 ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์และบนแผง (Panel) การทำงานเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.6 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงและบันทึกการตั้งค่าต่างๆเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.7 ตรวจสอบลักษณะภายนอกและการเชื่อมต่อของสายเคเบิลแต่ละเส้นเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.8 ตรวจสอบฟังก์ชันและรูปลักษณ์ของโพรบเป็นปกติหรือไม่	✓	
1.9 ตรวจสอบสามารถจัดเก็บภาพได้ตามปกติหรือไม่	✓	
1.10 ตรวจสอบบันทึกการทำงานได้ตามปกติหรือไม่	✓	
1.11 ตรวจสอบความสว่างของจอภาพ	✓	
1.12 ตรวจสอบเวลาและวันที่แสดงอย่างถูกต้องบนจอภาพ	✓	
1.13 ตรวจสอบการทำงานของแทร็คบอล (Trackball) เป็นปกติหรือไม่	✓	
2. การตรวจสอบทั่วไป		
2.1 บันทึกภาพและตรวจสอบการสแกน	✓	
2.2 บันทึกเวลาการทำงานของโพรบ	✓	
2.3 ตรวจสอบความละเอียดคอนทราสต์, การทะลุทลวง, ความละเอียดของภาพ	✓	
3. การทำความสะอาดเครื่อง		
3.1 ทำความสะอาดภายในของระบบและพัดลม	✓	
3.2 ทำความสะอาดตัวกรอง (Filter)	✓	
3.3 ทำความสะอาดหน้าจอ, ทำความสะอาดแผงปุ่มกด (Panel)	✓	
3.4 ทำความสะอาดสายไฟและสายเคเบิล	✓	
3.5 ทำความสะอาดจอภาพ LCD, ฝาครอบเครื่อง (Cover)	✓	
3.6 ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อพ่วงและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม	✓	



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34120-25-7

CMC BIOTECH CO., LTD.

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด

Head Office : 364 Soi Ladprao 94 (Panjamit), Ladprao Road, Plab-pla, Wangthonglang, Bangkok 10310

สำนักงานใหญ่ : 364 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. (662) 530-4995-6, 559-2179-80, 538-4102, 538-0710 Fax. (662) 530-7231

ส่วนเพิ่มเติมของงานบริการ Maintenance

1. แนะนำวิธีการเปิด-ปิดเครื่องอย่างถูกวิธีของเครื่อง Ultrasound

- ☒ ทำการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ☐ ผู้ใช้งานไม่สะดวกให้แนะนำการใช้งาน
☐ ผู้ใช้งานต้องการให้เข้ามาทำการสอนอีกครั้งในหัวข้อนี้

2. แนะนำการดูแลรักษาเบื้องต้นของเครื่อง Ultrasound

- ☒ ทำการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ☐ ผู้ใช้งานไม่สะดวกให้แนะนำการใช้งาน
☐ ผู้ใช้งานต้องการให้เข้ามาทำการสอนอีกครั้งในหัวข้อนี้

3. แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้น (ฟังก์ชันการทำงานทั่วไป)

- ☒ ทำการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ☐ ผู้ใช้งานไม่สะดวกให้แนะนำการใช้งาน
☐ ผู้ใช้งานต้องการให้เข้ามาทำการสอนอีกครั้งในหัวข้อนี้

4. แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่อง Ultrasound

- ☒ ทำการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ☐ ผู้ใช้งานไม่สะดวกให้แนะนำการใช้งาน
☐ ผู้ใช้งานต้องการให้เข้ามาทำการสอนอีกครั้งในหัวข้อนี้

5. ตอบปัญหาและข้อสงสัยอื่นๆของเครื่องที่ติดตั้งจากลูกค้า (ถ้ามี)

- ☒ ทำการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ☐ ผู้ใช้งานไม่สะดวกให้แนะนำการใช้งาน

6. ลูกค้าต้องการให้เข้ามาสอนการใช้งานเครื่องและการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นอีกครั้งหรือไม่

- ☐ ผู้ใช้งานต้องการให้เข้ามาสอนการใช้งานอีกครั้ง วันที่.....
☒ ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้เข้ามาสอนการใช้งานอีกครั้ง ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

ลายมือชื่อวิศวกร.....

Nattawat/Chuchart

ลายมือชื่อลูกค้า.....

[Signature]

วันที่.....20/05/2026.....

วันที่.....20/05/2026.....